



系統架構簡報

PhrozenStudio Dental

系統架構、Agent Box 與收費分級概覽

版本 v0.1(草稿) · 2026 · 牙科 3D 列印多終端架構

收費分級：Standard 與 Plus


功能對照 (定價待定)

功能 / 能力	Standard 本地專業工具	Plus Standard 全部 + 雲端自動化
切片 / 支撐 / 中空 / Ortho (本地運算)	✓	✓
機台控制與送印 (連線模式)	✓	✓
多終端使用 (筆電 / 手機 / Chromebook)	✓	✓
雲端帳號、列印紀錄、S3 檔案儲存	✓	✓
離線可用 (透過本機 agent)	✓	✓
hextra 進階長支撐 (赤兔級品質)	—	✓
AI 自動支撐 / 自動擺位最佳化	—	✓
雲端運算 / 異地切片 (免本機算力)	—	✓
離開診所、於行動端使用進階功能	—	✓

Standard = 完整的本地專業工具 · Plus = Standard 全部 + 雲端撐起的自動化能力。價格欄位待定。


系統架構：現況（本地運算版本）

切片運算 100% 在本機 —— 零雲端運算成本、可離線

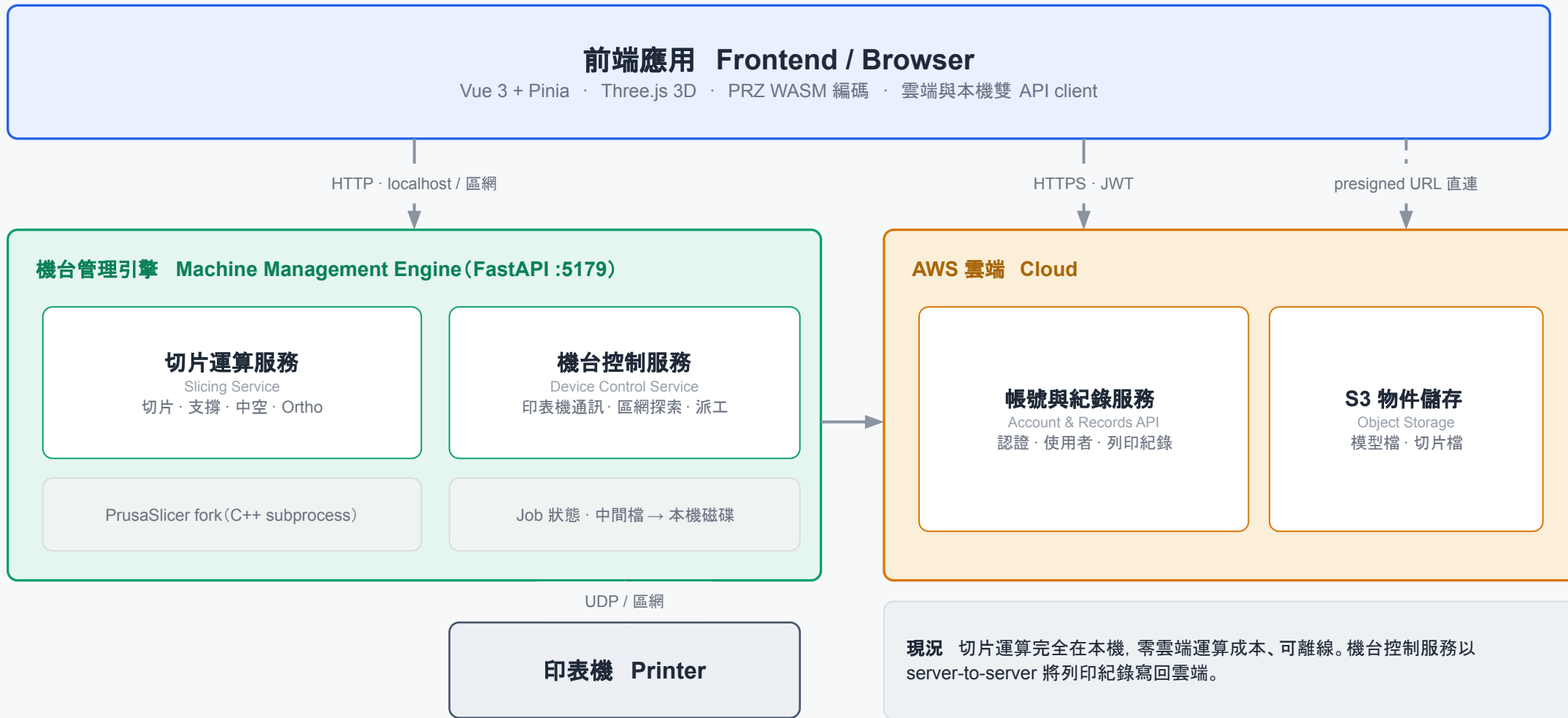


系統架構：算力上雲(混合版本)

切片運算移至雲端，機台控制仍留本機 —— 代價是延遲、成本與離線能力

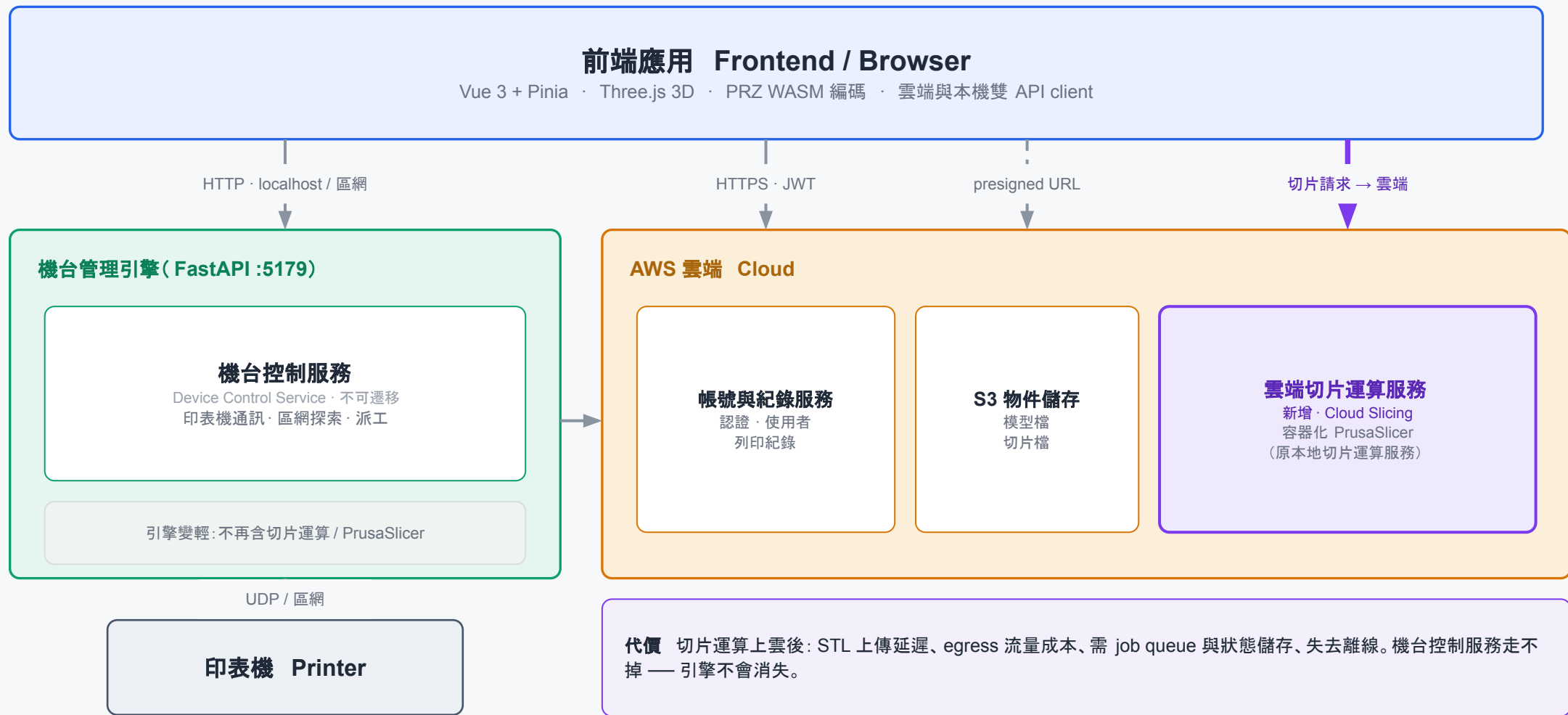

什麼是 Agent Box

機台管理引擎的部署單位 —— 一間診所一台, 所有終端共用

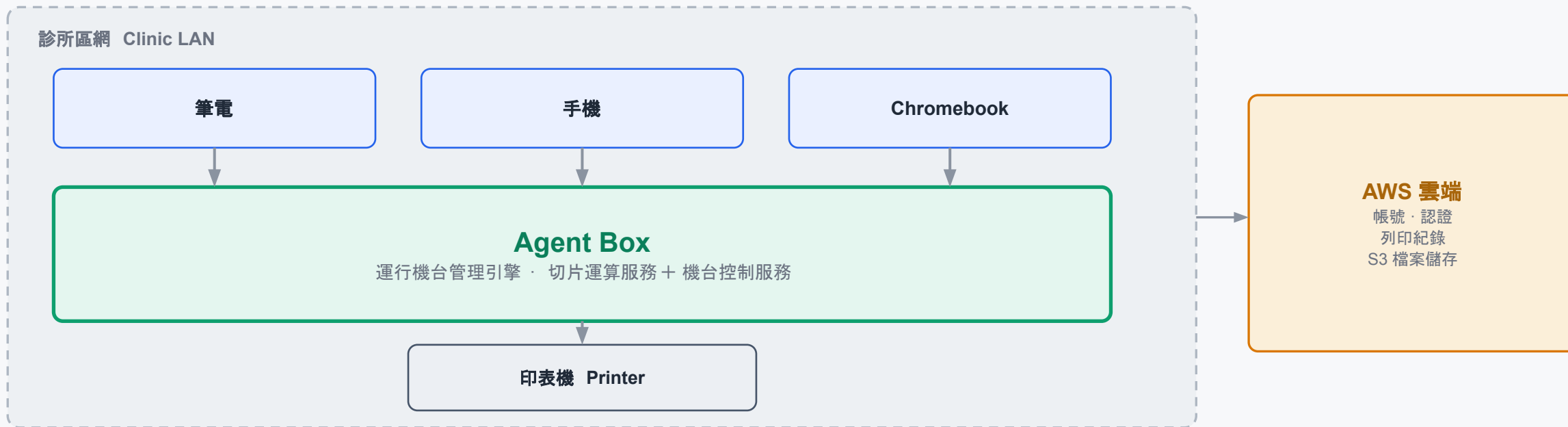

① Windows 工作站

最常見的形態 —— 同一台機器同時是使用者終端, 也是 Agent Box。

② 專用迷你主機

只負責當引擎的「診所 hub」; 終端全為手機 / Chromebook 時最適用。

何時可免 改用手動模式(雲端切片 + USB/SD 送印), 或未來改用連雲機種, 即可不需要 Agent Box。

終端節點：筆電 (Web)


可同時作為前端與引擎宿主 —— 能力最完整




終端節點：手機 (Mobile)

純終端 —— 能做什麼，取決於是否構得到 agent

在診所內 · 與工作站同區網

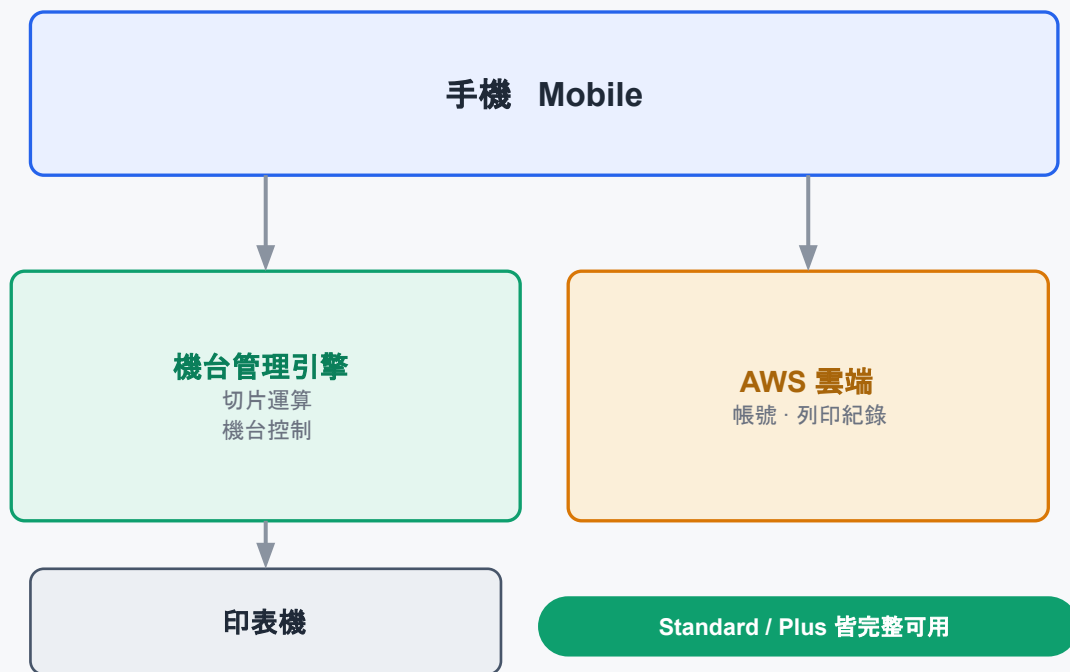

離開診所 · 僅雲端可達

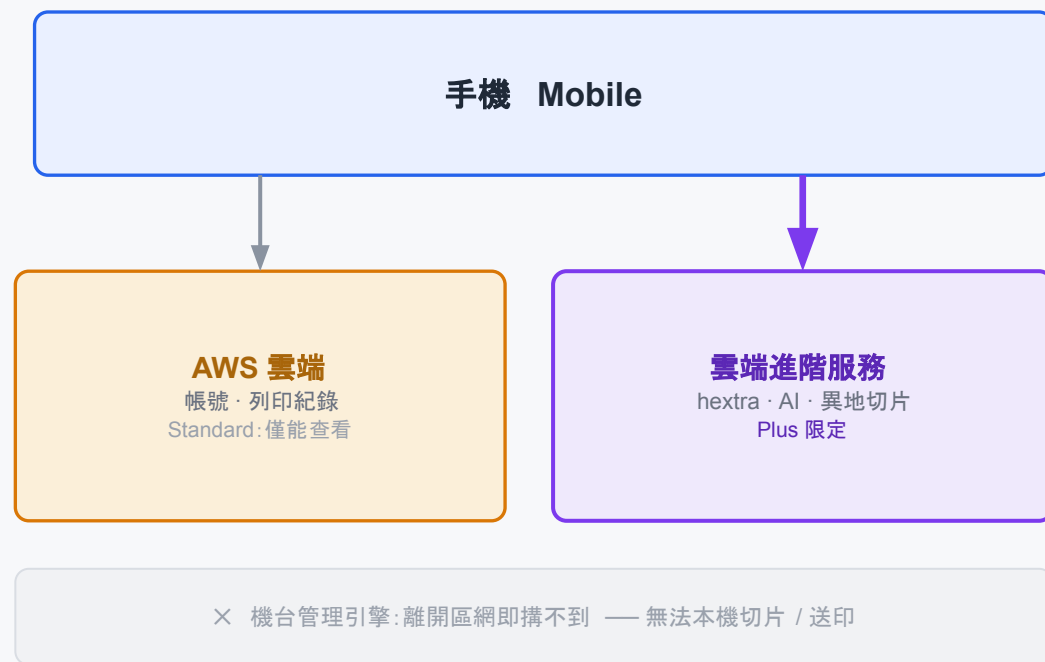


重點 手機是純終端。在診所內 Standard / Plus 都完整可用; 離開診所 Standard 只能查看紀錄, Plus 仍能用 hextra / AI / 異地切片。

終端節點：Chromebook

跑不動 agent —— 連線模式需 agent box, 手動模式(Plus)可免

■ 連線模式 · 需區網上的 agent box

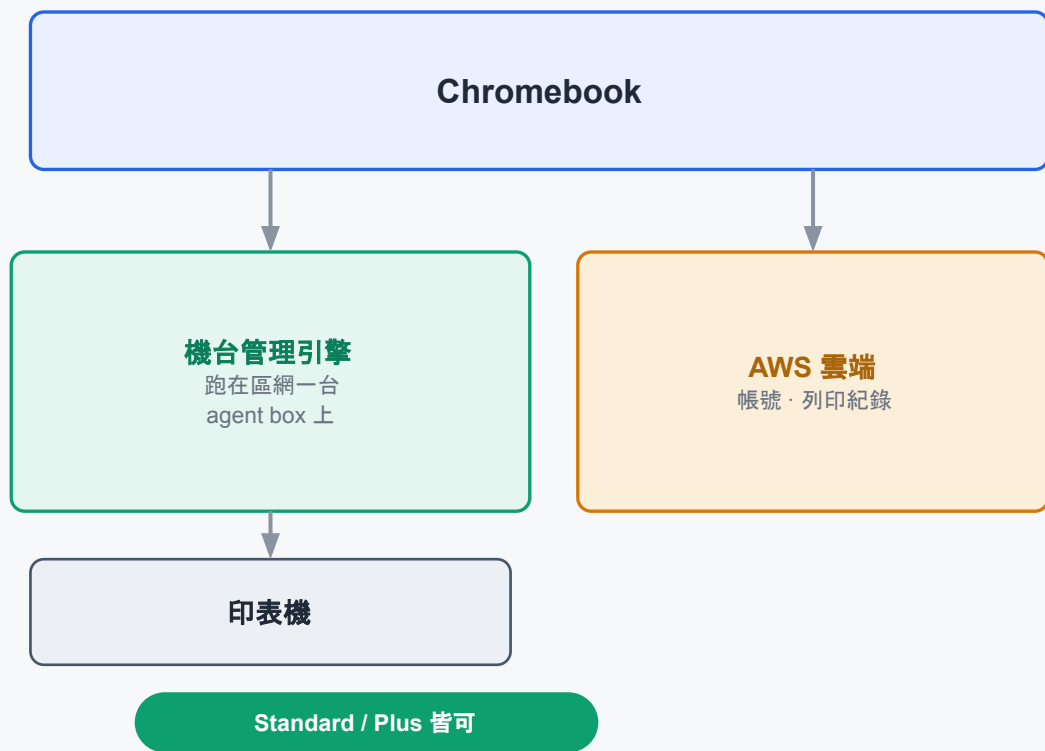

■ 手動模式(Plus) · 免 agent box



Chromebook 連線模式靠區網上一台 agent box(Standard / Plus 皆可)。手動模式(Plus):雲端切片 → 下載 → USB/SD 送印, 免 box, 但失去即時監控與自動紀錄 —— 適合教育場景。